

## DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE

### RÉFÉRENCES


SIIM4050 / SIIM4051 / SIIM4052



Le drap de rehaussement à usage unique permet de rehausser un patient sur un brancard, une table d'examen ou un lit. Il se met en place et se retire comme un drap de rehaussement classique.

Son épaisseur de 50µm lui permet d'avoir une bonne résistance à la déchirure, tout en ayant un coefficient de friction faible.

Le drap de rehaussement à usage unique est particulièrement recommandé dans les services où il y a beaucoup de rotations de patients (urgences, imagerie, réveil, bloc), et les services dans lesquels les protocoles de nettoyage sont contraignants pour les draps classiques (radiothérapie, isotopes, médecine gériatrique, patients à l'isolement, dermatologie) ■

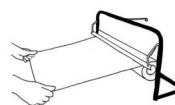

© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## LES PRODUIT

**Bonne résistance** à la déchirure.

**Diminue considérablement l'effort** à fournir pour la mobilisation.

**Surface de glisse adaptée** à toutes les morphologies.

## OPTION

Dériveur support mural (Livré avec SIIM4052).

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE


TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER



## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions
SIIM4050 <i>N° Identification UDI : 03760311371202</i>	1 rouleau de 200 draps de rehaussement à Usage Unique	120 x 90 cm
SIIM4051 <i>N° Identification UDI : 03760311371196</i>	2 rouleaux de 200 draps de rehaussement à Usage Unique (400 draps)	120 x 90 cm
SIIM4052 <i>N° Identification UDI : 03760311371189</i>	4 rouleaux de 200 draps de rehaussement à Usage Unique (800 draps). 1 dérouleur fourni	120 x 90 cm
DEROULEUR	Dérouleur support mural pour draps de transfert à Usage Unique	64 x 10 x 14 cm
DEVPIEDNC	Dévidoir sur pied pour rouleau de housses à Usage Unique	70 x 90 x h 130 cm

PRODUIT :	DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE
DESCRIPTION COURTE :	DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE
RÉFÉRENCE :	SIIM4050 SIIM4051 SIIM4052
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	<i>VOIR TABLEAU REF</i>
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	60 G LE DRAP
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	100 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET HAUTE LOIRE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de rehaussement en position allongée.</p> <p>Pour une utilisation au bloc opératoire, retirer le drap après le positionnement du patient sur la table d'opération.</p> <p>Pour un rehaussement sur matelas à air ou anti escarres, prévoir un rehaussement à 2 personnes. Après utilisation suivre le protocole d'élimination des déchets à risque infectieux (DASRI).</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, ne pas laisser le drap au sol.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>100% recyclable si non souillé.</p> <p>Usage unique, non stérile.</p> <p>Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI).</p> <p>Alimentaire conformément au décret n°2007-766 du 10/05/2007 et règlement CE 1935/2004 du 27/10/2004.</p>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL).</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant le ou les rouleau(x) et sa fiche technique. (Dérouleur fourni avec la référence SIIM4052)</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Incolore « cristal ».</p>