


## MATELAS AMORTISSEUR DE CHUTE

RÉFÉRENCE  
SARDOM0800

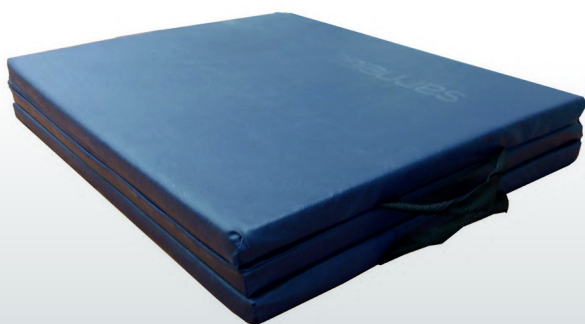

Le matelas amortisseur de chute DOMOCHUTE® est un matelas qui se place au pied du lit pour prévenir toute blessure due à une chute du patient pendant son sommeil.

Composé d'une mousse à haute densité d'absorption de choc, il dispose également d'une face inférieure antidérapante.

Le matelas est pliant pour ne pas gêner les mouvements autour du lit pendant la journée et est équipé d'une poignée pour faciliter le transport ■

### PERDRE L'ÉQUILIBRE, GLISSER... ET TOMBER.

En moyenne, un tiers des plus de 65 ans vivant à leur domicile tombent au moins une fois par an. En institution, c'est trois fois plus fréquent.

La peur enclenche un cercle vicieux qui augmente le risque de chutes.

### LES PRODUIT

Pliant et équipé de deux poignées, il est facile à transporter et à stocker dans la journée.

Face antidérapante pour assurer un bon maintien au sol.

Sa haute densité facilite la reprise d'appuis post chute.

Revêtement non feu M2, sans phtalates, Sanitized, résistant à l'abrasion.

#### ALTER ECO SANTE



7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

© NFCA Pictures

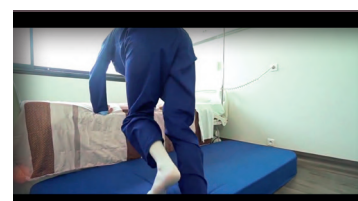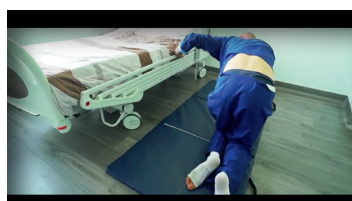


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ


YouTube



VOTRE CONSEILLER



## FICHE TECHNIQUE

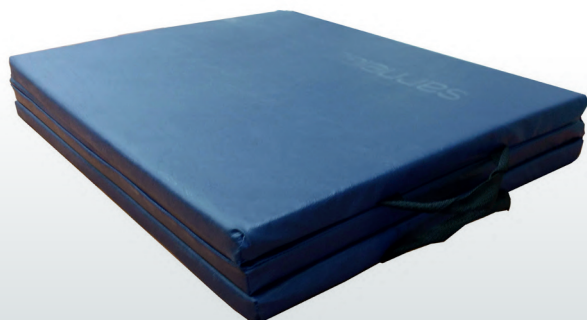

PRODUIT :	DOMOCHUTE®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS AMORTISSEUR DE CHUTE
RÉFÉRENCE :	SARDOM0800
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311371042
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	3,8 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	SARNEIGE
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Amortissement de chute de patients alités. Aligner le haut du matelas amortisseur de chute, déplié, à hauteur de la tête de lit. Abaisser le lit en position la plus basse. Plier le matelas après utilisation, à l'aide des poignées.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTATION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides eau de javel, assouplissant et produits abra-sifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Lavage avec de l'eau et du savon doux. Ne pas repasser. Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Mousse de polyéthylène (densité 30kg/m3). Revêtement non feu M2, sans phtalates, Sanitized, résistant à l'abrasion.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 matelas amortisseur DOMOCHUTE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Bleu.
DIMENSIONS :	DÉPLIÉ : 180 x 80 x 3 cm. PLIÉ : 60 x 80 x 12 cm.