

COUSSIN MULTIFONCTION

RÉFÉRENCE
SI21637



E SCABOLI® est un coussin multifonction. Utilisé comme aide au rehaussement allongé, ses deux positions d'appui des pieds permettent aux patients, de toute taille, de se rehausser graduellement. Laisse à la disposition du patient, cela permet de limiter le glissement au fond du lit.

ESCABOLI® peut aussi être utilisé comme suspension talonnière pour les soins de pied et s'avère confortable pour le patient grâce aux bords taillés en biseau.


Ce coussin multifonction peut également soutenir les membres supérieurs ou servir de cale de confort dans le lit ■

LES + PRODUIT

Multifonction : aide au rehaussement, suspension talonnière, coussin de support, support de décubitus latéral.

Entretien de l'autonomie avec une participation active de l'utilisateur à son rehaussement.

Étanche, facile à nettoyer et compatible avec un usage médical.

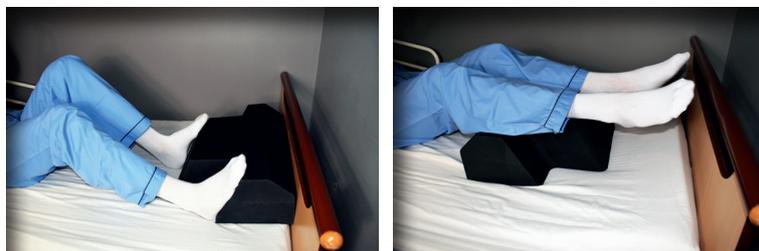

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

OPTIONS

MULTIGLIDE




Peut être associé à un drap de transfert MULTIGLIDE®, à une sangle POULIE® ou une potence de lit pour faciliter le rehaussement au lit.

POULIE



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	ESCABOLI®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN MULTIFONCTION
RÉFÉRENCE :	SI21637
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370946
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	900 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Pour tout sujet présentant une difficulté de rehaussement autonome par faiblesse des membres inférieurs, hémiplegie, akinésie (maladie de Parkinson) ou désadaptation des schémas moteurs.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications précédemment citées. Contre indiqué pour tout patient présentant une interdiction d'appui sur un membre inférieur (post-opératoire par exemple).
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes de pH neutre. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	XPE, mousse de polyéthylène certifiée pour un usage médical classe 1. Classement au feu M1.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 coussin multifonction ESCABOLI® et sa fiche technique.
DIMENSIONS :	49 x 40 x 15 cm
COULEUR :	Noir.