

SUR-MATELAS DE MOBILISATION AU LIT

RÉFÉRENCES

SIIM4309 - SIIM180200XXL - SIIM4312 - SIIM4313
 SIIM150/75N - SIIM150/140N - SIIM150/200N - SIIM140200LPL - SIIM180200LPL
 SIIM85/200LPLNS - SIIM110/200LPLNS - SIIM140200PU

Le FOUR-WAY® est un système de mobilisation alternative, composé de tissus anti-dérapants et de tissus glissants. Selon la position du système de verrouillage, le couchage devient, en un seul geste, fixe ou mobile.

Dans les unités de soins aigus ou pour les patients à forte charge pondérale, le système FOUR-WAY® est un gage de rapidité, de confort et d'économie de mobilisations. Disposant de multiples points de préhension et de plusieurs poignées, les soignants peuvent alors sécuriser une latéralisation, rehausser, éviter des mobilisations superflues et réaliser des soins en assurant le bien-être et le confort du patient en soins intensifs et palliatifs.

Compatible avec tous les types de matelas de prévention d'escarres, FOUR-WAY® s'utilise aussi pour latéraliser avec des lève-personnes ■



LES + PRODUIT

Compatible avec tous les types de matelas de prévention d'escarres.

Le dispositif étant en permanence sur le lit, **il est utilisable rapidement.**


Assure une sécurité pour le patient et pour l'aidant.

Le modèle microfibre est particulièrement adapté à l'**incontinence avec une absorption de 2L/m²**

ETUDE CLINIQUE

FRICIONS ET CISAILLEMENTS : LA SOLUTION FOUR-WAY®

Une étude clinique menée au CHU d'Aalborg (Danemark) montre que le système FOUR-WAY® ne nuit pas à l'effet d'un matelas à réduction de pression et qu'il élimine la friction et le cisaillement dans la manutention des patients. Étude complète sur demande.

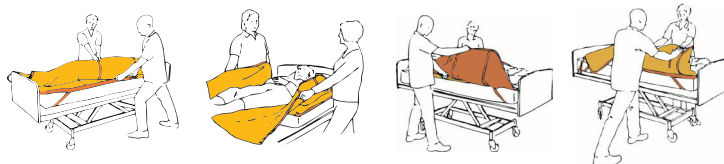

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



OPTIONS

TRAPEZE®




Peut être utilisé avec un lève-personne, un coussin TRAPEZE® ou encore une planche TWO-MOVE®

TWO-MOVE®



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Dimensions
SIIM4309	FOUR-WAY GLIDE® Molletonné vert pour lit de 90 cm. Composé des références SIIM85/200LPLNS et SIIM140200LPL.	Alèse 200 x 85 cm Dessus 200 x 140 cm
SIIM180200XXL	FOUR-WAY GLIDE® XL Molletonné vert pour lit de 120 cm. Composé des références SIIM110/200LPLNS et SIIM180200LPL.	Alèse 200 x 110 cm Dessus 200 x 180 cm
SIIM4312	FOUR-WAY GLIDE® Microfibre pour lit de 90 cm. Composé des références SIIM150/75N, SIIM150/140N et SIIM85/200LPLNS.	Alèse 200 x 85 cm Dessus 225 x 150 cm
SIIM4313	FOUR-WAY GLIDE® Microfibre pour lit de 90 cm. Composé des références SIIM85/200LPLNS et SIIM150/200N.	Alèse 200 x 85 cm Dessus 200 x 150 cm
SIIM140200LPL	Dessus pour lit de 90 cm. Molletonné vert.	200 x 140 cm
SIIM180200LPL	Dessus pour lit de 120 cm. Molletonné vert.	200 x 180 cm
SIIM150/75N	Dessus séparable microfibre. Partie supérieure.	85 x 150 cm
SIIM150/140N	Dessus séparable microfibre. Partie inférieure.	140 x 150 cm
SIIM150/200N	Dessus complet microfibre non séparable.	200 x 150 cm
SIIM85/200LPLNS	Alèse FOUR-WAY GLIDE® pour lit de 90 cm.	200 x 85 cm
SIIM110/200LPLNS	Alèse FOUR-WAY GLIDE® pour lit de 120 cm.	200 x 110 cm
SIIM140200PU	Couverture de protection imperméable. Compatible avec la référence SIIM140200LPL.	220 x 140 cm

PRODUIT :	FOUR-WAY GLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	SUR-MATELAS DE MOBILISATION AU LIT
RÉFÉRENCE :	SIIM4309 - SIIM180200XXL - SIIM4312 - SIIM4313 SIIM150/75N - SIIM150/140N - SIIM150/200N SIIM140200LPL - SIIM180200LPL SIIM85/200LPLNS - SIIM110/200LPLNS - SIIM140200PU
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	2,30 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

Réf	N° Identification UDI	Réf	N° Identification UDI
SIIM4309	05708012001491	SIIM150/75N	05708012512034
SIIM180200XXL	05708012458820	SIIM150/140N	05708012512041
SIIM4312	05708012002511	SIIM150/200N	05708012001736
SIIM4313	En cours d'obtention	SIIM85/200LPLNS	05708012469970
SIIM140200LPL	05708012469956	SIIM110/200LPLNS	En cours d'obtention
SIIM180200LPL	05708012458820	SIIM140200PU	05708012389537

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Mobilisation par une tierce personne, d'un sujet présentant une incapacité de mobilisation au lit. Adapté pour les soins intensifs, les patients atones et/ou algiques.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, ne pas laisser le FOUR-WAY GLIDE® au sol. Ne pas soulever le sujet avec le FOUR-WAY GLIDE®.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. - Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. - Lavage à la main, trempage et essuyage. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Repassage à froid ou à très faible température (- de 100 °C). - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	DESSUS : microfibre, polyester. DESSOUS : 100% nylon antistatique non permanent. REPLISSAGE : polyester et membrane en polyuréthane. POIGNÉES : 100% polyester.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 FOUR-WAY GLIDE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert et noir.