


MATELAS RADIOTRSPARENT

RÉFÉRENCES

SIIM450

SIIM451

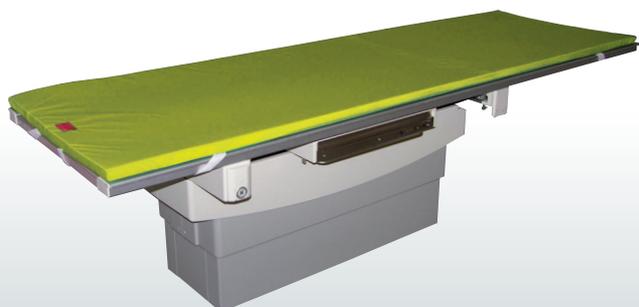

MATRADIO® est un matelas qui s'installe sur la table de radio.

Composé d'une face supérieure glissante, le MATRADIO® est solidarisé à la table de radio grâce au tissu antidérapant et aux 4 sangles élastiques maintenues aux 4 coins de la table.

Les manipulations des opérateurs sont facilitées par la face glissante.

De plus, sa mousse de 3 cm d'épaisseur procure du confort au patient durant l'examen.

Le MATRADIO® est radiotransparent et amagnétique ■

LES PRODUIT


Pouvoir de glisse important **facilitant les mobilisations sur la table de radiographie.**

Mousse permettant **le confort du patient.**

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

REF	Dimensions
SIIM450	220 x 75 x 3 cm
SIIM451	241 x 75 x 3 cm

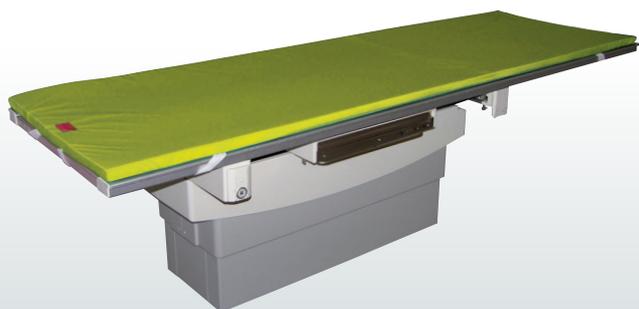

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	MATRADIO®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS RADIOTRANSSPARENT
RÉFÉRENCE :	SIIM450 SIIM451
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	2,95 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	S'installe sur une table de radio. L'étiquette «DESSUS» indique la face supérieure du matelas.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un matériel détérioré.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Nylon avec enduction PVC, mousse polyuréthane, tissu antidérapant.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 matelas MATRADIO ® et sa fiche technique.
COULEUR :	Dessus : Vert. Dessous : Gris anthracite.