


PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SI21300

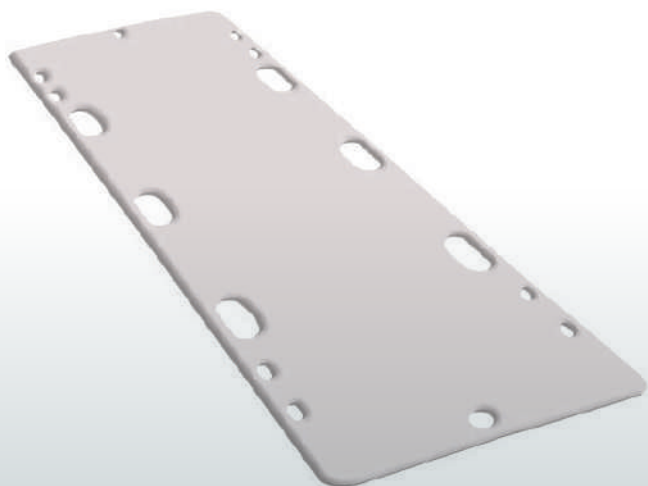

La planche de transfert MEDITRANS® est un plan rigide permettant de placer, entre deux plans, une passerelle sur laquelle le patient peut être transféré à l'aide d'une alèse de traction ou un tube de transfert MULTIGLIDE®.

Les 6 poignées latérales favorisent la mise en place et le maniement à vide de la planche. Un trou à chaque extrémité permet un stockage vertical.

Le dessous de la planche peut rester lisse pour aider au glissement lors de la traction.

Mais il peut également être équipé de patins antidérapants ce qui permet d'assurer une bonne stabilité entre les plans de départ et d'arrivée ■

LES + PRODUIT

Poignées latérales facilitant la mise en place et le maniement de la planche à vide.

Possibilité d'équiper de **patins antidérapants**.

Radiotransparent et amagnétique.

OPTIONS

Lot de 16 patins antidérapants

Réf : SI21301

TUBE DE TRANSFERT



La planche de transfert MEDITRANS peut également être utilisée en association avec un tube de transfert pour encore faciliter les mobilisations.

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET


REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ


YouTube



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

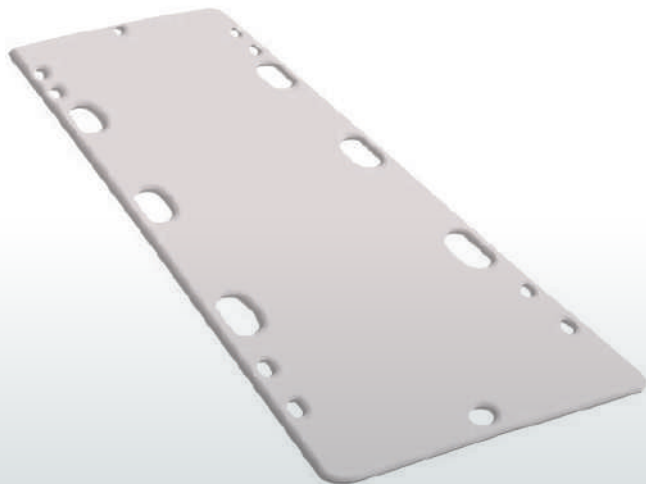

PRODUIT :	MEDITRANS®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SI2 1300
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311371035
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	4,2 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	120 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans horizontaux, d'un sujet présentant une incapacité de bouger.</p> <p>La planche de transfert MEDITRANS® sert de passerelle sur laquelle le sujet peut être transféré. Contrôlez visuellement le produit avant son usage. Il ne doit pas être fendu ou coupé.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Ne pas utiliser un matériel détérioré.</p> <p>Ne pas laisser au sol après usage.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage et désinfection par vaporisation et essuyage d'un détergent désinfectant de surface haute de pH neutre.</p> <p>Peut être nettoyée au savon et à l'eau tiède.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Polyéthylène haute densité.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant 1 planche de transfert MEDITRANS® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Blanc.</p>
DIMENSIONS :	<p>170 x 49 cm.</p>