

AIDE AU POSITIONNEMENT D'UN PATIENT

RÉFÉRENCES

SIIM35 / SIIM3510

Les moufles MULTIGLIDE® sont l'auxiliaire indispensable du soignant pour positionner correctement un patient dans son lit, sur un fauteuil ou sur la table d'opération par exemple.

Grâce au phénomène de glisse produit par le tissu MULTIGLIDE®, elles permettent au soignant de passer les mains ainsi que les avant-bras sous un patient sans contrainte ni effort, tout en respectant son confort ■




LES PRODUIT

Idéal pour vérifier les pressions sur un coussin à cellules pneumatiques télescopiques.

Coefficient de friction très bas.

Permet la mobilisation de patient à la peau fragile.

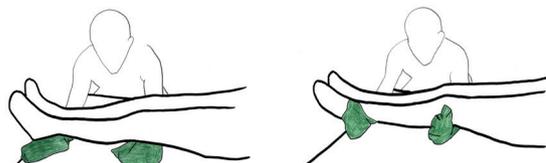


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	MOUFLES MULTIGLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	AIDE AU POSITIONNEMENT D'UN PATIENT
RÉFÉRENCE :	SIIM35 SIIM35 10
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012254576
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	22G LA PAIRE
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant des difficultés de positionnement dans son lit ou au fauteuil.</p> <p>Convient particulièrement à la mobilisation de patients ayant la peau fragile.</p> <p>Doivent être désinfectées entre chaque patient.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, les moufles ne doivent pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lavage à 80°, séchage à 65°. – Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air. – Autoclave 136°.
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Tissu MULTIGLIDE®.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant une paire de Moufles MULTIGLIDE® et sa fiche technique.</p> <p>10 paires pour la référence SIIM3510.</p>
COULEUR :	<p>Vert.</p>
DIMENSIONS :	<p>20 x 50 cm la moufle.</p>