

## TUBES DE TRANSFERT

### RÉFÉRENCES :

SIIM83 / SIIM200 / SIIM70/195



Les tubes de transfert MULTIGLIDE® permettent à un ou deux soignants de déplacer un patient à l'horizontale.

Insérés en hémicorps, ils facilitent les transferts latéraux entre deux plans de même niveau et sans espacement entre eux, en le faisant glisser dessus.


Souples et pliables au pied du brancard, ils sont fournis avec une housse en tissu imperméable pour les versions molletonnées ■

## LES PRODUIT

Permet de **réduire les TMS.**

**Léger** et facilement transportable.

**Compatible avec les normes de désinfection hospitalière.**

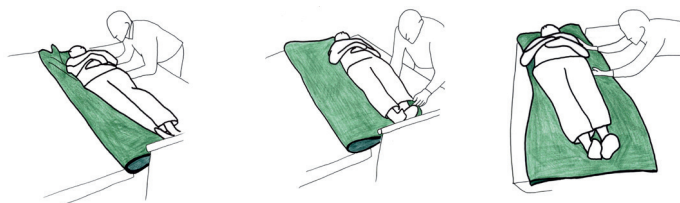

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## OPTION


### MEDITRANS



Le tube MULTIGLIDE® peut être associé à la planche de transfert MEDITRANS® qui sert alors de passerelle entre deux plans.



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**  
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE  
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65  
[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Taille	Poids
SIIM70/195 N° Identification UDI : 05708012128785	Tube MULTIGLIDE® molletonné avec une housse imperméable de protection	70 x 195 cm	1,4 kg
SIIM83 N° Identification UDI : 05708012169764	Tube MULTIGLIDE® imperméable pour translation	72 x 130 cm	0,150 kg
SIIM200 N° Identification UDI : 05708012254477	Tube MULTIGLIDE® imperméable pour translation également utilisable comme Housse imperméable pour Tube MULTIGLIDE® molletonné	70 x 200 cm	0,250 kg



PRODUIT :	MULTIGLIDE®
DESCRIPTION COURTE :	TUBES DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM83 SIIM200 SIIM70/195
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne d'un sujet présentant une incapacité de bouger, sur plan horizontal sans écart de niveau ni espace. Les étiquettes doivent toujours être à l'extérieur.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Après utilisation le tube MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. • Lavage à 80° en machine, séchage à 60° maximum. • Lavage à la main, trempage et essuyage. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). • Autoclave à 136° (sauf molletonné).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Tube MULTIGLIDE® : Nylon contrelaqué 160° avec enduction polyuréthane. Tube MULTIGLIDE® molletonné : Extérieur 65% Polyester et 35% Coton. Intérieur Nylon. Garniture Polyester.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 tube MULTIGLIDE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert